

- Η καλλιέργεια των αμνιακών κυττάρων είναι δυνατή σε όλη τη διάρκεια του 2^{ου} και 3^{ου} τριμήνου της κύησης. **Προτεινόμενη εβδομάδα κύησης η 18^η.**
- Η λήψη του αμνιακού υγρού να γίνεται όσο είναι δυνατόν **κάτω από συνθήκες στειρότητας.**
- Η απαραίτητη ποσότητα αμνιακού υγρού για την ανάλυση των χρωμοσωμάτων είναι 15-20ml και συλλέγεται σε αποστειρωμένο κωνικό φιαλίδιο καλλιέργειας, με πλαστικό βιδωτό καπάκι.
- **Συνιστάται η ανάδευση της κοιλιάς πριν την αμνιοπαρακέντηση.** Με τον τρόπο αυτό έχουμε αμνιακό υγρό πλούσιο σε κύτταρα.
- **Προσοχή στη σύριγγα.** Ελέγξτε την ημερομηνία λήξης της παρτίδας.
- **Να πετάτε το πρώτο 1ml** του αμνιακού υγρού για την αποφυγή επιμειξίας μητρικών κυττάρων.
- Αδειάστε το αμνιακό υγρό από τη σύριγγα απευθείας στο αποστειρωμένο φιαλίδιο καλλιέργειας. Προσοχή το πώμα να μην ακουμπήσει σε καμία επιφάνεια. Κρατάτε το πώμα του φιαλιδίου κοντά στο φιαλίδιο και με **το εσωτερικό του προς τα κάτω**, για την αποφυγή επιμολύνσεων. Βιδώστε αμέσως το πώμα.
- Σημειώστε **το όνομα της εξεταζόμενης** στο πλάι του φιαλιδίου.
- Τοποθετήστε το φιαλίδιο στην **ειδική θήκη ασφαλούς μεταφοράς NUNC.**
- Συμπληρώστε με κάθε λεπτομέρεια **το ιστορικό** της εξεταζόμενης. Πολλές φορές μέσω του ιστορικού επισημαίνονται συμπληρωματικά γενετικά προβλήματα.
- Το δείγμα διατηρείται πάντα σε **θερμοκρασία περιβάλλοντος μέχρι 48 ώρες** από τη λήψη.
- Η αποστολή του φιαλιδίου γίνεται με **συνεργάτη της InterGenetics** (απευθείας από την υπηρεσία μεταφορών του Εργαστηρίου μας για την ευρύτερη περιοχή της Αθήνας ή με υπηρεσία ταχυμεταφορών για τις εκτός Αθηνών περιοχές), σύμφωνα με τις προδιαγραφές, που αναγράφονται στην ΟΕ.001, οδηγία του συστήματος διαχείρισης για την αποθήκευση, συσκευασία και διακίνηση των δειγμάτων.
- Για τυχόν περαιτέρω πληροφορίες παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τη **Γραμματεία Υπηρεσιών** της InterGenetics στο τηλέφωνο **210-7705010**, ή στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση info@intergenetics.eu.

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

Υπογραφή:


Ημερομηνία: 01/07/2012

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ


Υπογραφή:

Ημερομηνία: 01/07/2012



- Ακολουθεί παραστατικά η παραπάνω οδηγία λήψεως του αμνιακού υγρού.

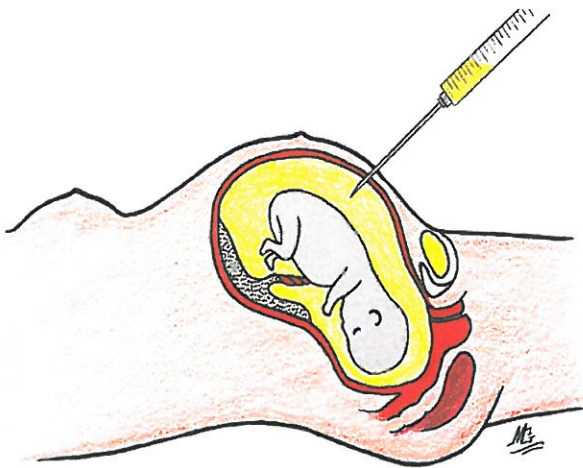

Εικόνα Α: Λήψη αμνιακού υγρού

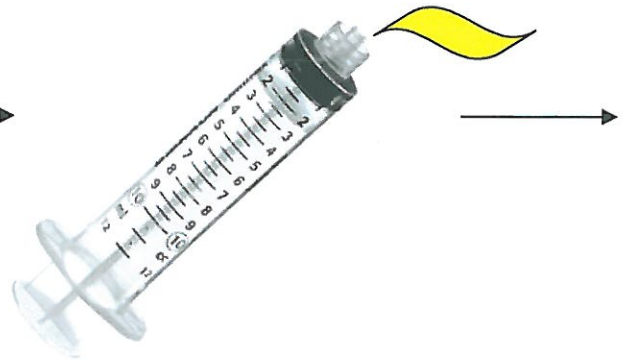

Εικόνα Β: Πετάμε 1ml για την αποφυγή επιμειξίας μητρικών κυττάρων

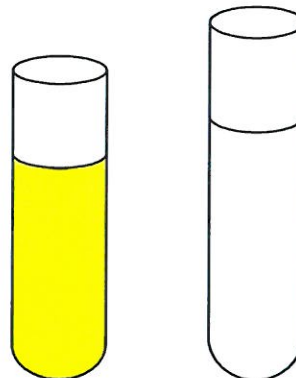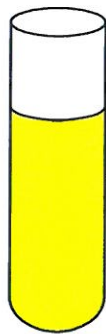

Εικόνα Γ: Τοποθέτηση του αμνιακού υγρού στο φιαλίδιο και κλείσιμο του πώματος

Εικόνα Δ: Αναγραφή του ονόματος στο πλάι του φιαλιδίου και τοποθέτηση του στη θήκη μεταφοράς.